


PD NEWBORN MODEL

PD Set For Newborn

- Soluset	1	Set
-Extention 18"	1	ชิ้น
-Three-Way	1	ชิ้น
-Uriofix(urine bag)	1	bag
-Syring 3 ml	1	อัน (เฉพาะปลดก)

ใช้น้ำยา Dialysate 1.5%

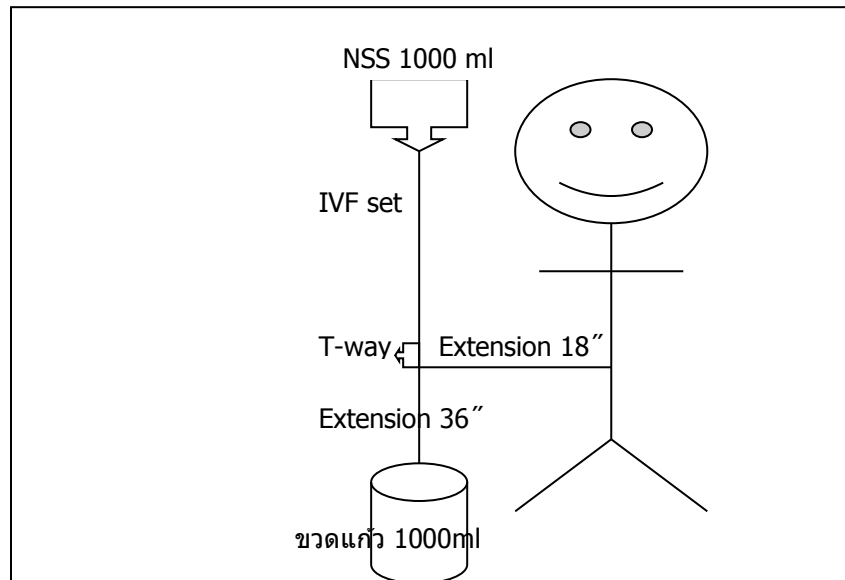

อุปกรณ์ในการ Flush CAPD (Tenckhoff)

1. NSS 1000 ml #1-2 bott
2. IVF set # 1 set
3. T-way # 1 pc.
4. Extension 18" ,36" # 1 /pcs.
5. ขวดแก้ว 1000ml # 1 bott
6. ขวดSterileใส่Povidine # 1 bott
7. Set D/S # 1 set
8. Syringe NSS Flush 10ml # 1 pc.
9. Syringe Heparin 3000^{UI} # 1 pc. (Dilute เท่า Priming Volume)
10. ผ้าสีเหลืองมัจจะกลางSterile# 1 pc.
11. จุก Cap Sterile # 1 pc.
12. Sterile Glove # 1 คู่

วิธีทำ

แช่จุก Cap ในขวด Sterile ด้วย Povidine ให้ท่วมจุกเลยถึงสาย Tenckhoff นานอย่างน้อย 5 นาที ต่อด้วย Extension 18" ปล่อน้ำในท้องออกทิ้งก่อน สังเกตสีน้ำ, Blood Clot,จำนวน ปิดทางน้ำออก เปิด NSS จำนวน 15-20 ml/kg เข้าท้องทิ้งไว้~5 นาที ปล่อน้ำในท้องออก ปิดทางน้ำออก เปิด NSS จำนวน 15-20 ml/kg เข้าท้องอีกครั้งทิ้งไว้~5 นาที ปล่อน้ำในท้องออก สังเกตสีน้ำ, Blood Clot,จำนวน ของ Dialysate Fluid.

ความถี่ในการ Irrigate

Day 1 หลังใส่ Tenckhoff ต่อจากนั้นดูลักษณะของ Dialysate Fluid ถ้าClear ทิ้งไว้ 3-4วัน จึง Flush อีกครั้ง ต่อจากนั้นรอเพื่อทำ CAPD ต่อไป

